

Convertir
des membres
du public en
patients



MedRx Kiosk

Tablette de dépistages
de l'audition

La tablette de dépistages de l'audition autonome

Conçue pour une utilisation non supervisée dans les lieux que vous choisissez. MedRx Kiosk se connecte à notre solution dans le cloud HearingBI, pour des pistes commerciales, des résultats en direct et bien plus encore.



MedRx Kiosk Auto-dépistage et génération de pistes commerciales

Étendez la portée de votre clinique en plaçant votre Kiosk dans des centres sociaux, des cabinets médicaux, des pharmacies et des lieux partenaires.

Accessoires Kiosk standard

- Tablette
- Casque DD65v2
- Logiciel et mode d'emploi

Accessoires en option

- Clavier
- Support personnalisé


Auto-dépistage étalonné

Le MedRx Kiosk est un dispositif de dépistage étalonné conçu avec trois tests du seuil en conduction aérienne rapides et faciles à réaliser. Les dépistages de l'audition peuvent fournir des évaluations rapides de recherche du seuil ou une évaluation de type son entendu/pas entendu. Chaque test prend moins de 5 minutes et est conçu de façon intuitive pour une compréhension facile par le patient. MedRx fournit aussi des tutoriels vidéo de 1 minute axés sur le patient pour l'aider à l'orienter dans la tâche de dépistage à venir. Le dépistage des patients dans votre cabinet ou dans un lieu ouvert au public n'a jamais été aussi facile grâce au MedRx Kiosk.

Tests non supervisés

MedRx a de nombreuses variations du Kiosk, y compris des dispositifs de dépistage n'incluant qu'une tablette ou des supports de tablettes entièrement fermés et sécurisés avec des lingettes désinfectantes. Le logiciel MedRx Kiosk est très efficace dans des environnements non supervisés où le wifi est présent. Le Kiosk peut se connecter à notre base de données cloud pour envoyer de manière sécurisée toutes les informations relatives au dépistage à votre compte de base de données cloud*. Si le wifi est interrompu, le logiciel stockera les dépistages de l'audition de manière cryptée jusqu'à ce que la connexion soit rétablie et que les transmissions aboutissent. Le logiciel est conçu avec une interface en boucle et des options d'inactivité. Ainsi, à la fin de chaque test, le logiciel prévendra que le test est terminé et retournera à l'écran d'introduction. Étendez la portée de votre clinique en plaçant votre Kiosk dans des centres sociaux, des cabinets médicaux, des pharmacies et des lieux partenaires.

*Abonnement à la base de donnée cloud nécessaire.

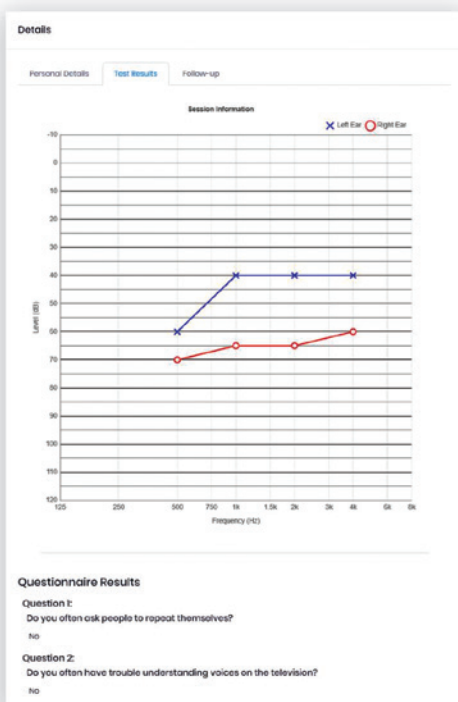

Connectez-vous à votre portail web pour visualiser des informations d'audiogramme et de questionnaire pendant que les patients utilisent le Kiosk.

- Tests non supervisés
- Chaque test prend moins de 5 minutes
- Auto-dépistage étalonné
- Les patients reçoivent les résultats et vos coordonnées par e-mail
- Visualisez les résultats en temps réel
- Choisissez des dispositifs de dépistage n'incluant qu'une tablette ou des supports de tablettes entièrement fermés et sécurisés

Visualiser des résultats de dépistage

Les résultats de dépistage du MedRx Kiosk sont disponibles en temps réel par l'intermédiaire de notre base de donnée cloud. Connectez-vous à votre portail web pour visualiser un audiogramme et un questionnaire en formation pendant que les patients utilisent le Kiosk. Choisissez de recevoir des alertes par e-mail pour tout dépistage terminé pour pouvoir réaliser un suivi immédiat.

Vos patients auront accès aux résultats immédiatement après avoir terminé le dépistage. Les propriétaires du Kiosk peuvent choisir de présenter des résultats de dépistage basiques ou détaillés au niveau de l'audiogramme (normal, léger, modéré et consulter). Les résultats peuvent aussi être automatiquement envoyés à tous les patients lorsqu'ils terminent l'examen.

Sécurité

Toutes les connexions à notre base de données sont sécurisées avec des connexions SSL 256 bits en transit et les bases de données sont cryptées à l'arrêt. Des procédures d'accès sécurisées avec des registres d'audit vous aideront à savoir qui a accédé à votre compte et exactement ce qui a été fait sur celui-ci. Le MedRx Kiosk et la base de données cloud satisfont et dépassent les exigences HIPAA, RGPD et HITECH en matière de données.

Analyse et suivi

MedRx a conçu la base de donnée cloud pour qu'elle puisse être mise à l'échelle et convenir aux cabinets uniques comme aux entreprises clientes. Nous avons conçu les tableaux de bord pour comprendre exactement les performances de chaque dispositif de dépistage. Le regroupement des Kiosks permet aux clients de visualiser les résultats de différentes façons. Filtrez les statistiques par heures, cabinets et régions pour voir le nombre de contacts obtenus, les pourcentages de perte auditive, les pistes commerciales reçues par jour et plus encore. MedRx souhaite que chaque propriétaire de Kiosk comprenne comment le produit profite à son entreprise.




Le dépistage des patients dans votre cabinet ou dans un lieu ouvert au public n'a jamais été aussi facile grâce au MedRx Kiosk.

Développez vos activités

Le MedRx Kiosk offre de nouvelles occasions pour que les entreprises étendent leur portée. Le système de MedRx Kiosk peut être placé dans des établissements sociaux ou publics pour offrir un accès facile aux dépistages de l'audition. Ce service d'intérêt général essentiel peut augmenter la sensibilisation en matière de perte auditive en offrant des points d'entrée faciles aux services de santé auditive. Tous les dépistages réalisés sont passés en revue par votre personnel médical et des informations relatives aux services de santé auditive, à la préservation de l'audition et aux appareils auditifs peuvent être fournies aux patients. Filtrez des listes de patients à partir de nos bases de données cloud et exportez-les vers votre plateforme de communication préférée.

Les patients qui réalisent des dépistages peuvent automatiquement recevoir des e-mails avec les informations relatives à leur perte auditive et les coordonnées et logos de votre cabinet. Tous les e-mails sont conçus pour que le patient les comprenne et contacte le cabinet de votre choix.

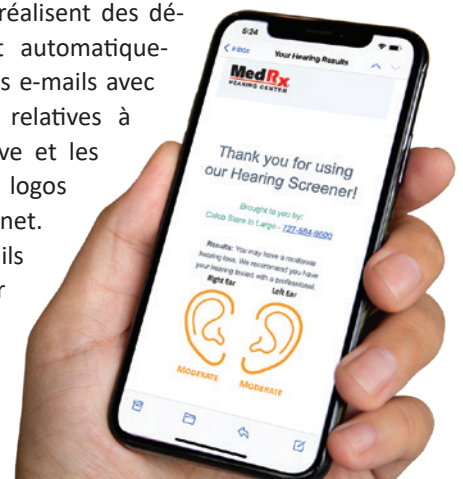

Kiosk

Spécifications techniques

Normes : audiomètre de dépistage conformément à ANSI S3.6, IEC 60645-1, Type 4 ; audiométrie tonale

Sorties : Casque MedRx Kiosk et DD65v2

Plage de fréquences : air : 125 Hz à 8 000 Hz

Plage de niveaux de sortie : CA : -10 dB HL à 80 dB HL maxi

Atténuation : incrément de 5 dB ou 1 dB

Compatible avec : Hearing BI, Noah, Blueprint OMS

Puissance requise : 0,5 A

Dimensions : L x P x H : 19,1 x 9,3 x 13,4 cm / 7,5 x 3,6 x 5,3 po (sans les connexions)

Poids : 389 g / 0,86 livres

Accessoires standard : casque MedRx Kiosk (DD65v2 en option), logiciel et modes d'emploi



Supports de tablette entièrement fermés et sécurisés.

MedRx®

Les bonnes choses viennent dans de petits écrans

MedRx International

DGS Diagnostics Sp. z o.o.

Rosówek 43

72-001 Kołbaskowo, Pologne

Téléphone : +48 91 835 63 00

E-mail : orders@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com

Distribué par :

MX-KIO-INTDS-1-FR Rev. 3

Suivi et établissement des objectifs

Le MedRx Kiosk et le système de base de données cloud sont conçus pour faciliter les évaluations diagnostiques dans votre cabinet. Tous les aspects du processus de dépistage orientent les clients vers le cabinet de santé auditive de votre choix. Cela inclut les logos, adresses, numéros de téléphone que le patient voit pendant les tests. Quand le test est terminé, le logiciel cloud aide les professionnels à réaliser le processus de suivi avec un objectif final de prise de rendez-vous au cabinet. Les professionnels peuvent définir des rappels de suivi dans le logiciel et prendre des notes concernant l'état du suivi. Le filtrage avancé permet de filtrer de grandes listes en fonction de vos besoins et de les exporter par segments. Les exportations segmentées peuvent être utiles au moment de la transition des pistes vers des plateformes marketing. Le MedRx Kiosk et la base de données cloud sont des outils conçus pour que les professionnels atteignent des gens dans leurs collectivités.

Intégration de Noah et Blueprint

Grâce à la base de données cloud de Kiosk, HearingBI, les professionnels peuvent regrouper les pistes commerciales et les contacts de Kiosk en un seul endroit, puis exporter rapidement les pistes commerciales viables vers Blueprint OMS ou Noah. L'assistant de HearingBI guide le clinicien dans la configuration et la personnalisation de sa base de données afin d'optimiser le suivi des pistes commerciales à l'aide d'outils de gestion des patients.

Le MedRx Kiosk vous permet de suivre facilement l'évolution de votre cabinet grâce à l'intégration fluide de Noah et de Blueprint à HearingBI. En vous guidant à chaque étape du processus d'acquisition de pistes commerciales, le MedRx Kiosk vous permet de prendre des décisions plus éclairées.



Adapté aux tests à domicile ou tests au volant.

