

Dépistage auditif pour tous les âges



# MA 25 / MA 27

Audiomètres de dépistage  
compacts et portables

# Des audiomètres de dépistage MAICO conçus pour vous accompagner partout

Conçus pour les professionnels de l'audition en déplacement, les audiomètres MA 25 et MA 27 offrent une excellente portabilité sans compromis sur les performances. Ultra-léger, le MA 25 tient dans la paume de la main et propose une gamme complète de tests, tandis que le robuste MA 27 est équipé d'une poignée intégrée et d'un compartiment de rangement pour les accessoires. Tous deux sont conçus pour résister aux déplacements fréquents, vous permettant d'être toujours prêt, où que vos patients aient besoin de vous.

Les audiomètres de dépistage en conduction aérienne (CA) MA 25 et MA 27 sont des solutions reconnues dans la gamme MAICO depuis plus de 45 ans. Aujourd'hui, ces modèles éprouvés ont été repensés pour répondre aux besoins évolutifs des professionnels de l'audition, en conservant leur fiabilité tout en intégrant des fonctionnalités modernisées et des performances optimisées. Cette nouvelle génération continue d'offrir des résultats précis et fiables, dans la continuité de la qualité MAICO.

## MA 25 – Points clés

- Audiomètre en conduction aérienne
- 11 fréquences de 125 Hz à 8000 Hz
- Intensités de test de -10 dB HL à 100 dB HL
- Tons purs et warble (pulsés ou continus)
- Portable et léger, seulement 980 g
- Fonctionnement avec 3 piles AA, alimentation secteur ou câble USB vers PC
- Version optionnelle MA 25e incluant le test automatisé Hughson-Westlake, la fonction Talk Forward et le logiciel PC MAICO Sessions



## MA 27 – Points clés


- Audiomètre en conduction aérienne
- 11 fréquences de 125 Hz à 8000 Hz
- Intensités de test de -10 dB HL à 100 dB HL
- Tons purs et warble (pulsés ou continus)
- Compact et portable avec poignée intégrée
- Compartiment intégré pour le rangement des accessoires
- Fonctionnement sur alimentation secteur ou via câble USB vers PC
- Version optionnelle MA 27e incluant le test automatisé Hughson-Westlake, la fonction Talk Forward et le logiciel PC MAICO Sessions



## Fondée pour faciliter le dépistage auditif

MAICO Diagnostics, fondée en 1937 par Leland A. Watson, a été créée pour répondre au besoin croissant des médecins de disposer d'un outil scientifique fiable pour l'évaluation de la perte auditive.

Depuis ses débuts, notre mission est de concevoir des équipements de test auditif précis et faciles à utiliser, favorisant la détection précoce des pertes auditives et contribuant à l'amélioration de la qualité de vie dans le monde entier.

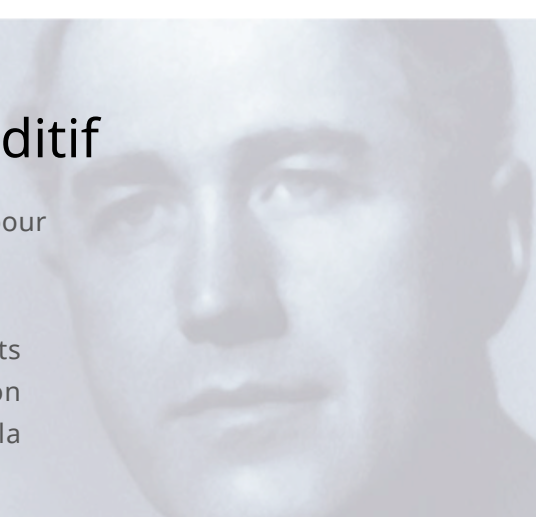

# Applications

## Dépistage chez l'enfant

Le dépistage auditif tonal est reconnu dans le monde entier comme le test de référence pour les enfants à partir de 3 ans. Les cabinets de pédiatrie ainsi que les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, constituent des environnements idéaux pour la réalisation de dépistages auditifs réguliers.

La réalisation régulière de ces tests permet une détection et une prise en charge rapides des troubles auditifs, offrant à chaque enfant les meilleures chances de bénéficier d'un accompagnement adapté et de développer pleinement son potentiel.

Les MA 25 / MA 27 permettent aux professionnels de réaliser des dépistages précis et efficaces dans tous les environnements.

- Dépistage scolaire
- Cabinets de pédiatrie




## Dépistage chez l'adulte

Les MA 25 et MA 27 offrent des performances fiables pour un large éventail d'applications de dépistage. Conçus pour allier précision et portabilité, ils permettent aux professionnels de réaliser facilement des évaluations auditives efficaces directement sur site.

Une gamme complète d'options de test, incluant le test automatisé Hughson-Westlake, garantit une grande flexibilité et une intégration fluide dans les pratiques quotidiennes. La détection précoce de la perte auditive contribue à améliorer la communication, l'intégration sociale et le bien-être global.

- Médecine du travail
- ORL / Cliniques
- Audioprothésiste

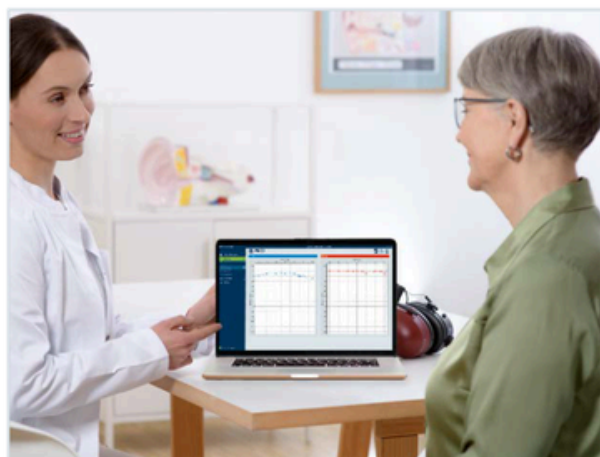

## MA 25 / MA 27 – Caractéristiques et avantages

### Conception précise et fiable

Grâce à leur portabilité, les MA 25 et MA 27 ont été conçus pour être robustes et fiables. Emportez votre audiomètre partout en toute confiance. Les commandes ergonomiques permettent d'ajuster facilement et confortablement les fréquences et les niveaux auditifs.

### Des performances fiables pour tous vos besoins de dépistage

Capables de réaliser des mesures en conduction aérienne, les MA 25 et MA 27 constituent des solutions idéales pour le dépistage auditif. Conformés aux normes IEC 60645-1 Type 4 / ANSI S3.6 Type 4, ils garantissent des résultats de test précis et fiables.

### Une gamme complète d'options de test

Les MA 25 et MA 27 offrent un large éventail de possibilités de test. Les fréquences s'étendent de 125 Hz à 8000 Hz et les intensités de test de -10 dB HL à 100 dB HL. Les tons purs et les tons warble (pulsés ou continus) complètent cette offre.

### Fonctionnalités étendues

Bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires en choisissant les versions étendues MA 25e / MA 27e. Cette version inclut le test automatique Hughson-Westlake et permet d'adapter facilement les paramètres selon vos préférences.

De plus, la fonction Talk Forward facilite l'utilisation de l'appareil, notamment dans les installations en cabine insonorisée.

### MA 25

#### Design compact et léger

Ultra-léger, le MA 25 ne pèse que 980 g. Suffisamment compact pour tenir dans la paume de la main ! Rangé dans sa mallette de transport, le MA 25 est l'un de nos audiomètres portables les plus compacts et les plus légers. Il fonctionne avec 3 piles AA, une alimentation secteur ou via un câble USB vers PC.



### MA 27

#### Facile à transporter

Son boîtier rigide et léger, doté d'une poignée intégrée et d'un compartiment de rangement, protège l'audiomètre tout en permettant un transport rapide et pratique.

L'espace de rangement permet également de stocker facilement les casques et autres accessoires.



# MA 25 / MA 27 – Caractéristiques et avantages

## Options de gestion des données

Choisissez la méthode de gestion des données qui vous convient : soit de manière classique sur un bloc d'audiogrammes, soit via une connexion PC avec les versions MA 25e et MA 27e.

## Compatible avec le logiciel Sessions PC : profitez d'un transfert de données rapide

Les MA 25e et MA 27e se connectent facilement à MAICO Sessions, notre logiciel intuitif de gestion et de transfert des données. Il permet une gestion simplifiée et une visualisation claire des résultats audiométriques, que ce soit pour générer rapidement des rapports PDF ou pour enregistrer les données directement dans sa base de données.

Pour plus de flexibilité, les résultats peuvent également être exportés au format XML afin d'optimiser votre flux de travail.



Appareils	MA 25	MA 25e	MA 27	MA 27e
<b>Audiométrie</b>				
125 Hz à 8000 Hz (11 fréquences)	✓	✓	✓	✓
Intensités de test de -10 à 100 dB HL	✓	✓	✓	✓
Ton pure + Ton pulsé et continu	✓	✓	✓	✓
<b>Tests spécifiques</b>				
Test automatisé Hughson-Westlake		✓		✓
<b>Logiciel</b>				
Logiciel PC MAICO Sessions		✓		✓
<b>Accessoires et fonctionnalités</b>				
Casque DD45	✓	✓	✓	✓
Casque DD65 v2	Option	Option	Option	Option
Bouton de réponse patient	Option	✓	Option	✓
Alimentation	3 piles AA ou alimentation secteur	3 piles AA ou alimentation secteur	✓	✓
Câble USB		✓		✓
Mallette de transport	✓	✓		
Talk Forward (communication patient)		✓		✓
Compartiment intégré			✓	✓

Les composants et accessoires peuvent varier selon la région et la configuration.

# MA 25 ou MA 27 – Composants, accessoires et logiciels




Audiomètre  
MA 25



Audiomètre  
MA 27



Casque à  
conduction  
aérienne  
DD45

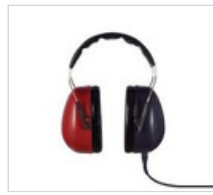

Casque à  
conduction  
aérienne  
DD65 v2



Bloc  
d'audiogrammes



Bouton de  
réponse  
patient



Mallette de  
transport  
pour MA 25



Logiciel  
PC  
MAICO  
Sessions



Découvrez  
notre vidéo  
de conseils  
pratiques MA  
25 / MA 27

Les composants et accessoires peuvent varier selon la région et la configuration.

## Découvrez les autres solutions MAICO

### easyTone



Audiométrie sur  
tablette simple et  
rapide

### MA 28



Audiométrie en  
conduction aérienne  
et osseuse portable



MAICO Diagnostics GmbH  
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Germany  
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50  
sales@maico.biz · www.maico.biz



Distributeur le plus proche :  
Diatec France  
17 Avenue des Louvresses,  
92230 Gennevilliers  
Tel : 01 41 43 23 23  
contact@diatec-diagnostics.fr



10/2025