




Otoscope vidéo
alimenté par USB



**Stockez des images
dans Noah et récupérez
facilement des résultats
lors de visites de suivi
pour montrer leurs
progrès aux patients**

Une conception idéale pour la
gestion du cérumen et le
positionnement du tube de sonde.

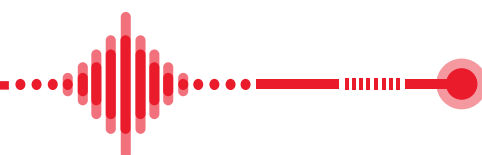

Otoscope vidéo

Spécifications techniques

N° de modèle : U42M
Capteur d'image : Capteur couleur 1/10"
Diamètre de la caméra : 4,2 mm
Taille de pixel : 2,25 µm x 2,25 µm
Spéculum : Heine 4 mm
Nombre de pixels effectifs : 1280 (H) X 720 (V)
AGC : Auto
AES : Auto
AWB : Auto
Plage dynamique : 68 dB
Rapport signal/bruit : 37 dB
Formule optique : 1G +2P + IR
Ouverture de la lentille : F3.8
Profondeur de champ : 10 mm – 30 mm
Source lumineuse : 6 LED de couleur blanche haute luminosité
Alimentation : DC 3,6 ~ 5 V
Système de sortie : Sortie USB
Consommation d'énergie : 0,5 W
Température de fonctionnement : -10°C à +35°C
Humidité de fonctionnement : 30 % ~ 90 % HR
Distorsion TV : < 5 %

Caractéristiques de l'otoscope

- Enregistrer, visualiser et stocker des images fixes claires et enregistrements de vidéo en direct
- Réaliser des tests otoscopiques
- Visualiser le tube du microphone sonde dans le conduit auditif
- Présente de façon pratique une liste des images prises, des commentaires et des aperçus des images sélectionnées
- Un module vidéo intégré est disponible dans le logiciel MedRx
- Idéal pour la gestion du cérumen
- Pour PC par connexion USB
- Périphérique HID, véritablement « Plug and Play » (brancher et utiliser)
- Compatible Noah, TIMS®, Blueprint OMS et Sycle

Spécifications informatiques minimum de MedRx :

Ordinateur PC compatible avec Windows®, Intel™ i5, 2,0 GHz ou supérieur, 4 Go de RAM, 20 Go d'espace libre sur le disque dur
Port USB 2.0 disponible, Windows 10 ou 11 Professionnel, Compatible avec USB 3.0

MedRx®

Les bonnes choses viennent dans de petits écrans

MedRx International

DGS Diagnostics Sp. z o.o.

Rosówek 43

72-001 Kołbaskowo, Pologne

Tél. : +48 91 835 63 00

E-mail : orders@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com

Distribué par :



Visualiser le tube du microphone sonde dans le conduit auditif.

MX-OS-INTDS-1-FR Rev. 3

